

< relaxmyway

FOOTINN II



< relaxmy way

2000-ben történt alapítása óta a CASADA név egyet jelent a wellness és fitness területén használt kiváló minőségű termékekkel.

Napjainkban a CASADA-készülékek a világ 37 országában kaphatók. A folyamatos fejlesztés, az egyedi design és a szigorúan az életminőség javítására való összpontosítás ugyanolyan jellemző a CASADA termékekre, mint a megbízható és kiváló minőség.

Gratulálunk!

A masszírozó készülék megvásárlásával Ön egészségtudatosságát igazolja. Annak érdekében, hogy hosszú ideig tudja használni a masszírozó készülék nyújtotta előnyöket, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat. Kívánjuk, hogy lelje örömét az Ön személyes **FootInn II** készülékében.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	4
A csomag tartalma	5
Műszaki adatok	5
Üzembe helyezés	5
Kezelőfelület	6
LED kijelző	7
Különlegességek	7
Talp reflexzónái	8
Hibakeresés	10
Tárolás / tisztítás	10
EU megfelelőségi nyilatkozat	11
Garanciális rendelkezések	11

Biztonsági utasítások



A masszírozó készülék használatba vétele előtt, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat a kifogástalan működés és az optimális hatás érdekében. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót!


- Ez a masszírozó készülék megfelel a technika elfogadott alapelveinek és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- Ez a készülék nem igényel karbantartást. Az esetleg szükséges javításokat kizárólag erre felhatalmazott szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat, valamint a jogosulatlan javítás biztonsági okokból tilos, és a garancia elvesztését eredményezi.
- Soha nem nyúljon vizes kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
- Ne hagyja, hogy a készüléket víz, magas hőmérséklet és közvetlen napsugár érje.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, hogy megelőzze a rövidzárlat veszélyét.
- Ne használjon sérült hálózati csatlakozódugót, hálózati kábelt vagy laza foglalatokat. Ha a csatlakozódugó vagy a hálózati kábel sérült, akkor azt a gyártóval, a szervizképviselettel vagy szakképzett személlyel kell kicseréltetni. Működési zavar esetén azonnal szüntesse meg az áramellátást. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használat kizárja a kártérítési kötelezettséget.
- Az izmok és az idegek túlzott stimulációjának elkerülése érdekében, ne lépje túl a 30 perces ajánlott masszírozási időt.
- Soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Minden masszázst -a kézz masszázst is - mellőzni kell, ha Ön terhes és/vagy Önnél az alábbi panaszok közül egy vagy több figyelhető meg a masszírozás területén: friss sérülés, trombózisos betegség, mindenféle gyulladás és duzzanat, valamint rákos megbetegedés. Ha betegségek és bántalmak miatt orvosi kezelés alatt áll, azt javasoljuk, hogy a masszírozás előtt egyeztessen kezelőorvosával.
- Ne használja a készüléket vezetés közben.
- Amennyiben Ön elektromos segédeszközöket, például szívritmus szabályzót használ, mindenképpen kérdezze meg orvosát a masszírozás előtt, ödés és az optimális hatás érdekében. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót!

Ezt az eszközt 8 évesnél idősebbek, és korlátozott testi, szellemi vagy szenzorikus képességekkel, valamint nem megfelelő szakismerettel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve abban az esetben, ha a készülék biztonságos használatáról felvilágosították őket és tisztában vannak annak lehetséges veszélyeivel. A gyerekek a masszázskészülékkel nem játszhatnak.

- A gép tisztítása és karbantartása gyermekek számára felügyelet nélkül tilos.
- A melegre érzékeny személyek a termék használat során különös gonddal járjanak el.
- Az eszköz csak a mellékelt tartozékokkal használható.

A csomag tartalma

- FootInn II készülék
- Hálózati adapter
- 12V-os autós adapter
- vezeték nélküli távirányító

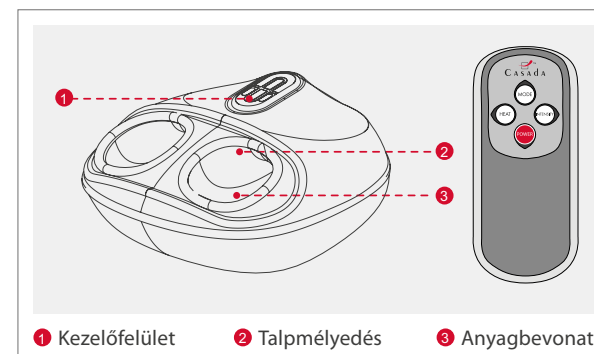

Műszaki adatok

Méretetek: 36,5 x 35 x 18 cm

Súly: 2,6 kg

Feszültség: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 25 Watt

Automatikus működési idő: 15 perc

Tanúsítványok:




Üzembe helyezés

Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a hálózati csatlakozódugón megadott feszültséggel. Ha még nem tette meg, csatlakoztassa a hálózati kábelt a masszírozó készülékhez, majd helyezze a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba.

A FootInn II készülék az autós adapter segítségével utazás közben is használható (nem vezetés közben!). Dugja az autós adaptert a szivargyújtóba.

Kezelőfelület

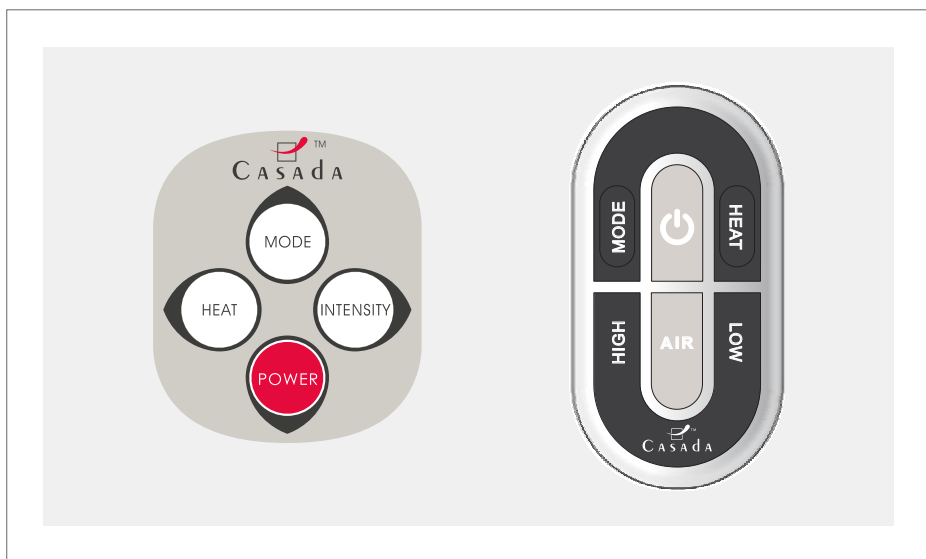

Taste	Funkcion
ON OFF	Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához, amely az AIR & MASSAGE MODUS funkcióval, alacsony intenzitású szinten lép működésbe.
MODE	Ha egyszer nyomja meg a MODE gombot, aktiválja a MASSAGE-MODUS beállítást. Átválthat AIR-MODUS funkcióra, ezesetben nyomja meg a gombot kétszer.
INTENSITY	A távirányító INTENSITY gombjának megnyomásával egyet kiválaszthat a két intenzitásszint közül.
HEAT	A gomb megnyomásával, akár magán az eszközön vagy a távirányítón, a talpmelegítő kezelés aktiválódik. Ha ezt a beállítást választja, az AIR-MODUS funkció nem lesz elérhető.
POWER	A távirányító POWER gombjának megnyomásával a masszázs bármikor befejezhető.
AIR	A készüléken található AIR gomb megnyomásával egyet kiválaszthat a két intenzitásszint közül.

Az automata masszázs 15 percig tart. Ez idő után a masszázseszköz automatikusan kikapcsolódik, hogy megakadályozza a túlmelegedést. Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból minden használat után.

LED kijelző

AIR & MASSAGE MODUS	Ha a légmasszázs funkciót aktiválja, a LED kijelző a készüléken sárgán világít.
FUSSROLLER-MASSAGE MODUS	Ha a lábfejroller masszázsfunkciót aktiválja, a LED kijelző a készüléken zölden világít.
AIR-MODUS	Ha a levegő funkciót aktiválja, a LED kijelző a készüléken pirosan világít.

Különlegességek



LÉGNYOMÁS

A le- és felfújódó légszakok pumpáló mozgást végeznek, amely természetes izomreflexet vált ki. Ez különösen jó hatású a vádli és a lábfej területén.



MELEGÍTÉS

A hő mélyre hatol és tovább áramlik az érintett testfelületről, ezáltal kitűnő izomlazító hatású. Épp a mélyreható hatás miatt ez a funkció különösen jól alkalmazható izomfeszültség esetén.



REFLEXZÓNÁK

A lábfejen végzett reflexzónamasszázs regenerálja a lábfej izomzatát és szinte minden testfelületen harmonizáló hatású.



LÁBFEJROLLER

A lábfejmasszázs stimulálja az idegvégződéseket, valamint az így érintett többi testrészt. Az izomfeszültség csökken, és javul az általános közérzet.



SAROKMASSZÁZS

A FootInn II készülék sarokkörnyéket kezelő része egy rendkívül jóhatású lábfejmasszázsra használható, speciális akupresszúra légszakokkal és sarokrollerekkel ellátva.

Talp reflexzónái

A talp-reflexzónák masszírozásának előnye a teljes test masszírozással szemben, hogy a lábakon a különböző szervek mintegy 72 000 idegvégződése található. A célzottan végzett masszírozás pozitívan befolyásolhatja a testet és fokozza a személyes jó közérzetet.

A talp reflexzónáinak gondos masszírozása serkenethe ti többek között az anyagcserét és a vérkeringést, segíti az emésztést és támogatja a test öngyógyító folyamatait. Minél többet gondoskodunk lábunk vitalitásáról, annál jobban érzi magát a testünk: A lábat egy mikro rendszerként kell felfogni, amelyben az egész szervezet megmutatkozik és egyedileg lehet gondoskodni róla.



- > Ha elhanyagoljuk lábainkat, akkor az az egész szervezetet befolyásolhatja.
- > A rossz testtartás miatt izomfeszültségek alakulhatnak ki. Ezek pedig rossz hatással lehetnek a gerincre, valamint az idegpályákra és további fizikai tünetet okozhatnak.
- > Alvászavarok és hideg lábak többnyire vérkeringési zavarok következménye.
- > A túl sok ülés és a mozgáshiány duzzadt lábakat, izomgörcsöt és vérpangást okozhat.
- > Lássá el lábait elegendő energiával, hogy az izmokba ágyazott vénák a vért ismét az egész testen keresztül szállítani tudják.

Hibakeresés

Probléma

A készülék az áramellátásra van csatlakoztatva, de sem a készülék, sem a kezelőfelület nem működik.

Hibaelhárítás

- 1) Ellenőrizze az adapterhez való csatlakozást.
- 2) Túl hosszú ideig tartó használat esetén a készülék túlmelegedhet. Ezért kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni 30-50 percig.

Tárolás / tisztítás

A rendszeres karbantartással növeli masszírozó készüléke élettartamát, ugyanakkor minden esetben biztonságos működést biztosít.

1. Ajánlott tárolás: száraz, pormentes helyen.
2. Ne tegye a készüléket folyadékok és nyílt láng közelébe.
3. A készüléket száraz, puha törölkendővel tisztítsa
4. Ha nem használja a készüléket, válassa le az áramhálózatról.

EU megfelelési nyilatkozat

Megfelel a 2006/95/EK európai irányelvnek.

Garanciális rendelkezések

A kereskedő a hátoldalon leírt termékre a törvényben meghatározott jótállási időt biztosítja. A garancia a vásárlás napjától érvényes. A vásárlás időpontja a vásárlást igazoló bizonylattal igazolható. A kereskedő a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, amelyeknél hibát állapítottak meg, díjmentesen megjavítja vagy kicseréli. Ez nem vonatkozik kopó alkatrészekre, mint például huzatra. Ennek feltétele a hibás termék beküldése a vásárlást igazoló bizonylattal együtt a jótállási idő lejártá előtt.

A garancia érvényét veszti, amennyiben egy hiba megállapítása után a garanciaigény például külső hatások vagy olyan javítás vagy módosítás eredményeként merül fel, amit nem a gyártó vagy a hivatalos forgalmazója hajtott végre.

A kereskedő garanciája kizárólag a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik. E garancia keretében a gyártó, illetve az eladó nem vállal további felelősséget és nem felelős a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából és/vagy a termék helytelen használatából eredő károkért. Amennyiben a gyártó a termék vizsgálatánál megállapítja, hogy a garanciális követelés olyan hibára vonatkozik, amelyre nem érvényes a garancia, illetve a jótállási idő lejárt, az ellenőrzés és a javítás költségeit a vevő köteles viselni.

Jogi nyilatkozat: Valamennyi tartalom nem gyógyító hatásra vonatkozó kijelentés. Betegségek és más fizikai rendellenességek diagnosztizálása és gyógyítása orvosok, természetgyógyászok vagy terapeuták által végzett kezelést igényel. Az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem használhatók orvosi kezelés helyettesítésére. Minden felhasználót arra kérnek, hogy alapos vizsgálattal, és ha szükséges, szakemberrel való konzultációt követően állapítsák meg, hogy az alkalmazások az adott esetben előnyösek-e. Bármely alkalmazás vagy terápia a felhasználó saját felelősségére történik. Elhatároljuk magunkat bármely gyógyító hatásra vonatkozó kijelentéstől vagy ígérettől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com | www.casada.com

Copyright A képek és a szöveg a CASADA International GmbH szerzői jogi oltalma alatt áll és nem használható a cég kifejezett jóváhagyása nélkül.

Copyright © 2015 CASADA International GmbH.
jog fenntartva.

