

braintronics®

Body&Mind syncSystem


C A S A d A
healthcare



time to relax



SKYLINER II



< timetorelax

2000. évi alapítása óta a CASADA név a kiváló minőségű wellness és fitness termékek védjegye. Ma a CASADA termékek világszerte kaphatók. A megbízható és kiváló minőség mellett a folyamatos fejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életmentősig javítását célzó szigorú törekvés jellemzi a CASADA termekéit.

Gratulálunk!

Köszönjük, hogy a Casada termékcsalád masszázsfotele mellett döntött.

Örülünk, hogy támogathatjuk személyes egészség megőrzési törekvéseit. Hogy pontosan tisztában legyen a termék működésével és rendeltetésszerű használatával, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Reméljük, hogy örömet leli személyes Skyliner II masszázs fotelében.

Tartalomjegyzék

Biztosági tudnivalók	116
Ellenjavallatok	117
Felhasználási útmutató	118
Felszereltség funkciók	119
Felepítés és összeszerelés	120
Tisztítás ápolás tárolás	127
Zavarelhárítás.....	128
Műszaki adatok.....	128
EU – megfeleléségi nyilatkozat	129
Jótállási feltételek	129

Biztonsági előírások



Mielőtt üzembe helyezi a masszázsfotelt, kérjük, a kifogástalan működés és az optimális hatásmód biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót!

- A masszázsfotel megfelel a jelenlegi műszaki elvárásoknak és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- A masszázsfotel fűtött elemekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvatosan használják a készüléket. (ICE 60335-2-32)
- A masszázsfotel nem igényel karbantartást. Az adott esetben szükséges javításokat csak az erre felhatalmazott szakember végezheti.
- A szakszerűtlen használat, valamint a nem felhatalmazott szakember által végzett javítás biztonsági okokból tilos és a garancia elvesztését vonja maga után.
- A balesetek elkerülése érdekében ujjaival ne nyúljon a masszázsfotel görgőjé közé.
- Nedves kézzel soha ne érintse meg a hálózati dugót
- Kerülje a masszázsfotel vízzel, magas hőmérséklettel és közvetlen napsugárzással való érintkezését.
- Ne használja a masszázsfotel magas páratartalommal rendelkező helyiségekben, mint pl. a fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha kis helyre beszorítva vagy olyan helyen, ahol el vannak takarva a ventilátorok és nem biztosított a friss levegő áramlása.
- A rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében kérjük, válassza le a masszázsfotel az áramellátásról, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne használjon sérült hálózati dugókat, kábeleket vagy meglazult foglalatokat.
- A sérült hálózati dugókat/kábeleket csak a gyártó, a szerviz képviselő, illetve szakképzett személy pótolhatja.
- Működési zavarok esetén kérjük, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
- A nem rendeltetés szerű vagy helytelen használat miatt bekövetkezett kár eseményekre a jótállás nem vonatkozik.
- Hogy az izomzat és az idegek túl erőltetését elkerülje, ne lépje túl a javasolt napi 30 perces masszázsidőt.
- A masszázsfotel megrongálódásának megelőzése érdekében soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Rövidzárlat vagy tűzveszély elkerülése érdekében feltétlenül a hálózati dugóhoz megfelelő csatlakozó aljzatokat használjon, és gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó teljesen illeszkedjen a csatlakozó aljzatba.
- Használat után és tisztítás előtt feltétlenül válassza le a masszázsfotel az áramellátásról.
- A tisztítást és a karbantartást 14 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Amennyiben a használat során váratlan áram kimaradás lép fel, akkor a masszázsfotel megrongálódásának elkerülése érdekében kérjük, haladéktalanul állítsa a kapcsolót OFF állásba és húzza ki a hálózati dugót.
- Nedves és megrongálódott villamos kábelekkel tilos a masszázsfotel működtetni tilos.
- Ha 14 év alatti gyermekek, fogyatékossgal élők vagy rosszabb egészségügyi állapotban levő személyek tartózkodnak a masszázsfotel közelében, illetve azt használják, akkor feltétlenül felügyelet szükséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel közvetlenül az étkezések után vagy alkohol hatása alatt.
- Csak a használati utasításban leírt célra használja a terméket.
- Kérjük csak a mellékelt tartozékokat használni.
- Kérjük a készülék megrongálódásának megelőzése érdekében ne álljon, üljön vagy ugráljon a lábtámaszon.
- A készülék megrongálódásának vagy személyi sérülések elkerülése érdekében ne próbáljon meg a kar vagy a hát-támlára ülni.
- Kérjük rendszeresen tartsa tisztán a masszázsfotel és ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak a fotel réseibe.
- Kérjük, ne rángassa a masszázsfotel hálózati csatlakozó zsinórját.
- Kérjük a láb támasz vagy a hát támla beállítása során győződjön meg arról, hogy nem kerültek alá más tárgyak, és nem tartózkodnak a közvetlen közelben kiváltképp 14 év alatti gyermekek.
- A termék kizárólag otthoni használatra készült.
- A flexibilis hálózati csatlakozó zsinór meg rongálódása esetén a cseréhez csak azonos flexibilis kábel használható, vagy, amelyet a gyártótól, illetve annak szerviz képviselőjétől kell beszerezni.

Ellenjavallatok

Amennyiben nem biztos abban, hogy használhatja a masszázsfotel, akkor mindenképpen konzultáljon orvosával.

- A terheség ideje alatt vagy a masszírozott területen fellelő következő panasz(ok) esetén a masszázsfotel használata tilos: Friss sérülések, trombózisos megbetegedések, gyulladások és bármilyen típusú duzzanat, valamint rákos megbetegedések esetén. Bármely orvosi kezelés során végzendő masszázsfotel az orvossal történő egyeztetés után javasolt.
- Testi, érzékszervi vagy pszichikai zavarokkal elő, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek a masszázsfotel csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete és irányítása mellett használhatják.
- A masszázsfotel használatából eredő kellemetlenségek vagy veszélyek megelőzése érdekében kérjük, hogy a következő személyek forduljanak orvoshoz a masszázsfotel használata előtt:
 - Fekvő betegek
 - Orvosi kezelés alatt álló személyek
 - Hatpanaszokban szenvedő betegek, gerinc problémákkal vagy gerincferdüléssel küzdő személyek.
 - Szívritmus-szabályozót viselők
- A masszázsfotel során fellelő fájdalom érzetek esetén kérjük, haladéktalanul szakítsa meg a használatot.
- Használat során fellépő sérülések esetén kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
- Kérjük, ne masszírozzon bepirosodott, megdagadt vagy gyulladt bőr felületet.
- Ez a masszázsfotel csak az otthoni wellness-masszázs céljára szolgál, nem orvosi masszázsfotel készülék és ezért nem tudja pótolni a szakorvosi kezelést.
- Napi 30 perces kezelés javasolt a masszázsfotelrel. Ugyanazt a testreszt legfeljebb 15 perces masszírozza, mivel a túlzott masszázsfotel miatt ellenkező hatás lephet fel.
- Ez a termék 14 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- 14 év alatti gyermekek különösen nagy figyelmet igényelnek. Győződjön meg róla, hogy nem játszanak a masszázsfotelrel.

ELLENJAVALLATOK „BRAINTRONICS“


- Pszichózisok (pl. skizofren vagy bipoláris zavarok, endogen depressziók)
- Személyiség zavarok
- Epilepszia és hasonló, rohamokkal járó megbetegedések
- Szívbetegségek
- A központi idegrendszer megbetegedései
- Trombózis
- ADS (figyelemzavar)
- A közelmúltban fellepett szív-infarktus vagy szélütés
- Szellemi fogyatékossg
- Szennedély betegségek mint kábítószer-, alkohol- és gyógyszer függőség
- Pszichoaktív szerek rendszeres szedése
- Terheség

TUDNIVALÓ: Etikai és jogi okokból ne alkalmazzon braintronics-ot gyermekeknél és fiataloknál a törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása nélkül. Olyan személyek, akik a meditáció miatt hit társakkal konfliktusba kerülhetnek, tekintsenek el a használatától.

Felhasználási útmutató


ÚTMUTATÓ

Saját biztonsága és a masszázsfotelben esetlegesen keletkező kár elkerülése érdekében ne gyakoroljon erős nyomást a kihúzott lábtámaszra.

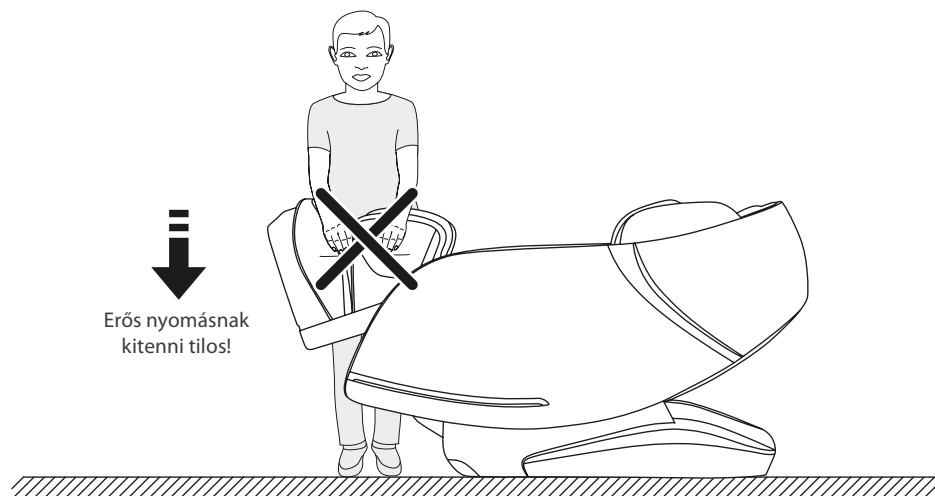



ÚTMUTATÓ

A masszázs megkezdése előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy a masszázsgörgők ki lettek húzva, és nem maradtak az ülőfelületben.

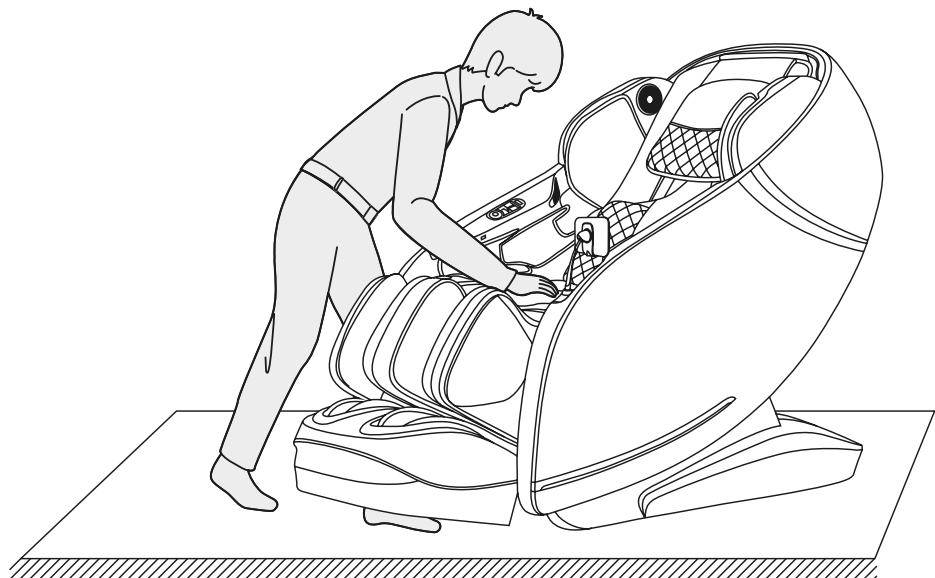


Felszereltség | funkciók

1. Fejpárna
2. 3D digitális hangszóró
3. Váll-légzsák
4. Hátpárna
5. Ágyék-légzsák
6. Ionos légfúvó
7. Gyorsstart gomb
8. USB-töltőcsatlakozó
9. Kar-légzsák
10. Oldalzseb
11. Ülőpárna
12. Vádlímasszázs
13. Kartámasz
14. LED-megvilágítás
15. Lábmasszázs

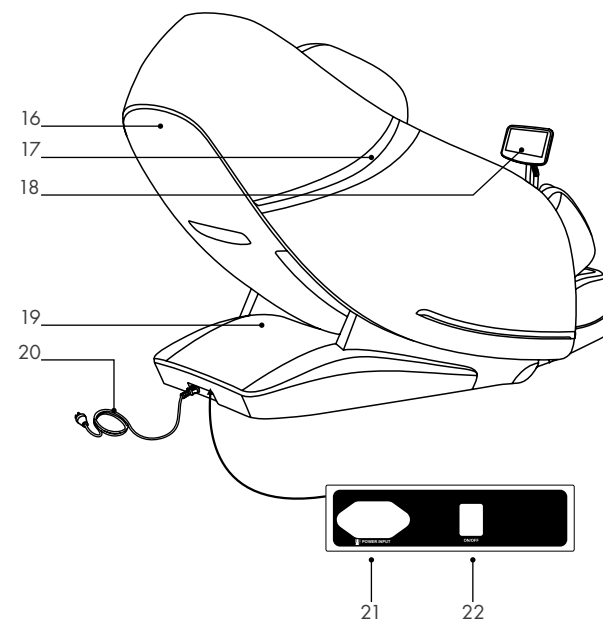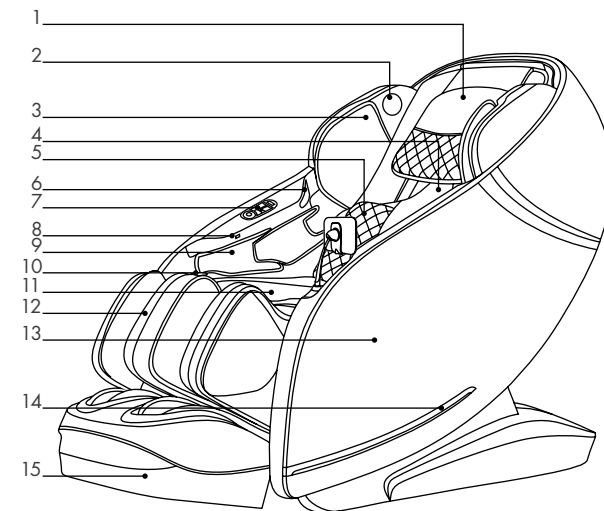


16. Hátfal
17. Oldalsó dekorációs takaróelem
18. Távkapcsoló
19. Védőhuzat
20. Villamaskábel
21. Hálózati csatlakozó
22. Elektromos csatlakozó doboz

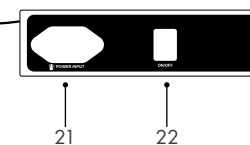


Felépítés és összeszerelés

1. Kartámasz összeszerelése

- Először vegye ki az összekötő aljzatokat és a légfűvócsövet a kartámaszból. Az fog ide illeni, amelyik a masszázsfotel vázában található. (1. ábra)
- Ezután kapcsolja össze az összes csatlakozót a (színekkel jelzett) hozzáillő darabokkal. (2. ábra)

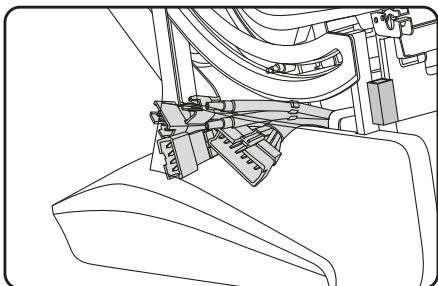


1. ábra

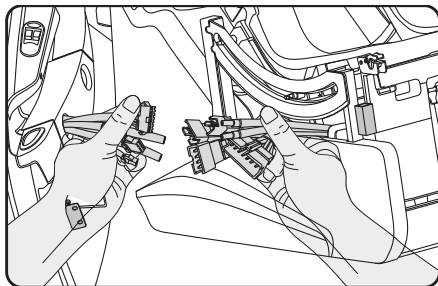


2. ábra

- A váz alsó részén lévő összekötőelemek szorosan oda vannak rögzítve a kartámaszon elhelyezett kapcsolóelemhez. Majd a légfűvócsövet is helyezze a helyes pozícióba. (3. ábra)
- A megfelelő csatlakozóvezetékek összekötése után vezesse át kézzel, nagyon óvatosan, az acélváz mögötti acélcső közepét a váz alsó részébe, közben figyeljen arra, hogy a légfűvócső sértetlen maradjon. (4. ábra)

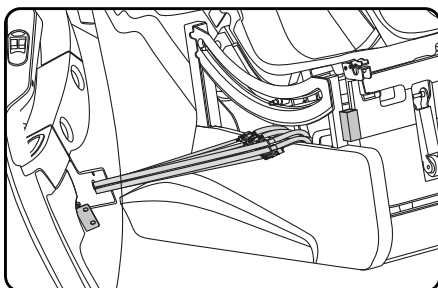


3. ábra

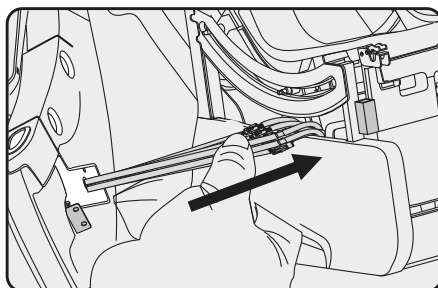


4. ábra

- Akassza a hátsó oldalfalon (belső oldal) lévő csapszeget a fotelen található erre kialakított helyre. (5. ábra)
- Fogja meg az ülésen lévő első összekapcsolóelemet, és enyhén megnyomva akassza be a megfelelő helyre. (6. ábra)

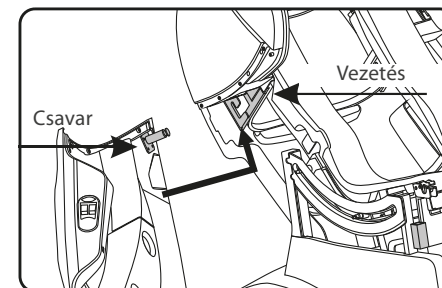


5. ábra

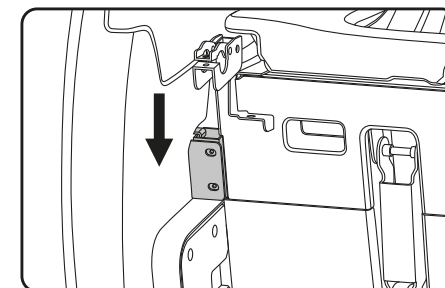


6. ábra

- Rögzítse az első tartóelemet két darab (M5X10) csavarral. (7. ábra)
- Rögzítse az oldalelem hátsó részét 5 darab (M4x10) csavarral. (8. ábra)

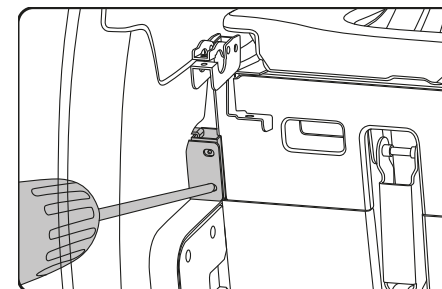


7. ábra

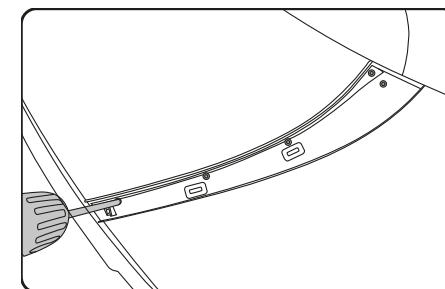


8. ábra

- Először akassza fel a szemellenzőket a keskeny oldalukkal az oldalelem felé, majd kapcsolja is össze őket. (9. ábra)
- Rögzítse a szemellenzőt belső oldalával a vállrészhez egy ST4,2x16 csavarral. Mindkét oldalsó rész összeszerelésének lépései megegyeznek. (10. ábra)

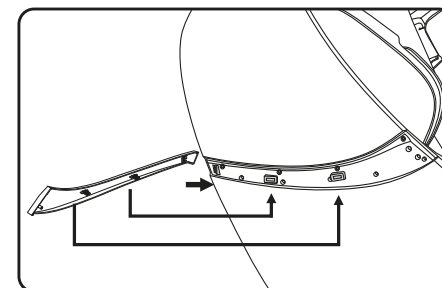

9. ábra

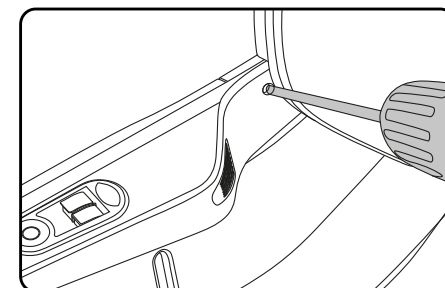


10. ábra


Felépítés és összeszerelés

2. A lábtartó összeszerelése

- Állítsa be a lábtartót az ülés elé, majd kösse össze a légfúvócsövet és a csatlakozót az ülésen lévő megfelelő részekkel. (1 + 2. ábra)
- Tolja vissza a légfúvócső és a hálózati kábel maradék részét az ülésben található erre kialakított helyre.

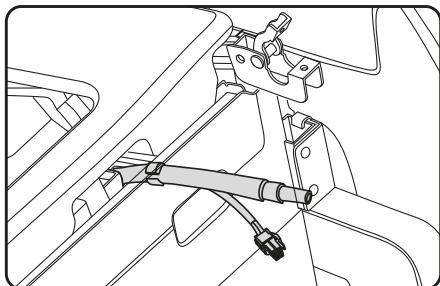


1. ábra

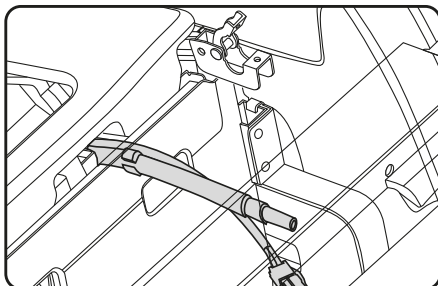


2. ábra

- Tolja az alsó és a külső tokot a láb részen található tartóra. Ügyeljen arra, hogy a fej felőli oldal a láb rész felé mutasson. (3. ábra)
- Nyissa ki a forgópántokat jobbra és balra az ülés belső oldalán. (4. ábra)

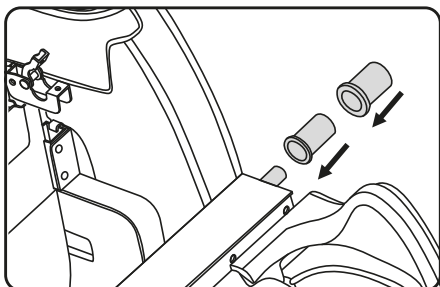


3. ábra

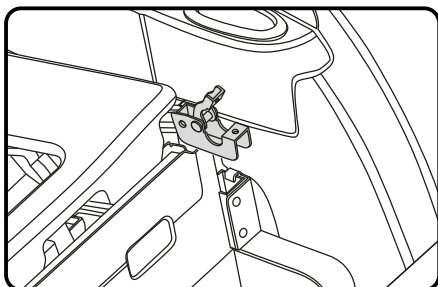


4. ábra

- Akassza be a láb részt a tokokkal együtt a forgópántokba. (5. ábra)
- Hajtsa be a forgópántokat és rögzítse őket egy darab M5 csavarral. (6. ábra)

Felépítés és összeszerelés

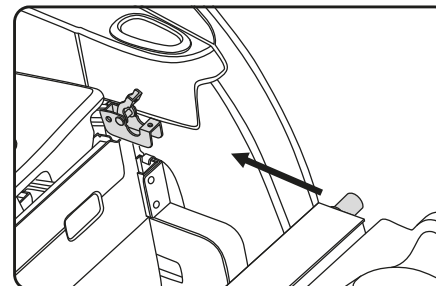


5. ábra

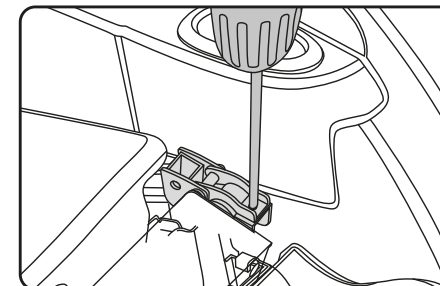

6. ábra


- Végül takarja le a forgópántokat a műanyag fedéllel. (7. ábra)

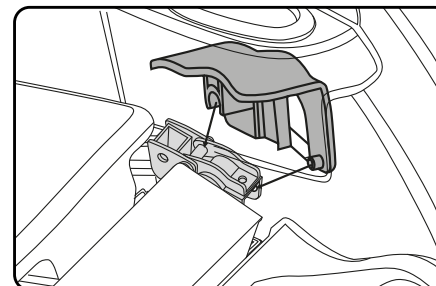


7. ábra

3. Érintőképernyő-tartó összeszerelése

- Helyezze be a tartót az oldalsó elembe és rögzítse 3 darab M4 csavarral. (1+2. ábra)

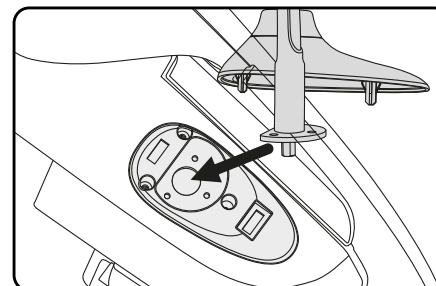


1. ábra

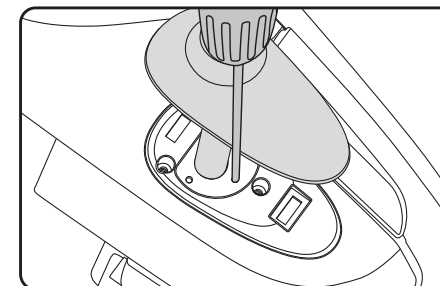


2. ábra

Felépítés és összeszerelés

- Pattintsa be a tartó műanyaglábazatát a masszázsfotel szerelőfelületére. (3+4. ábra)

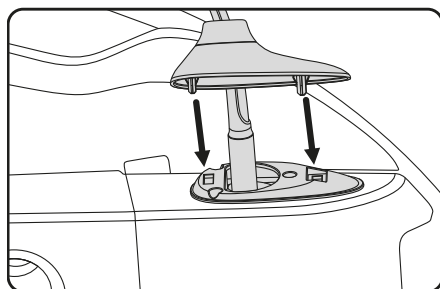

3. ábra

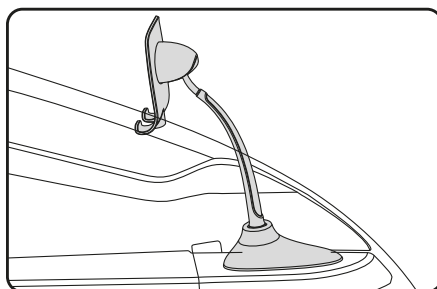


4. ábra

Utalás: A távirányító csatlakozója a tartójának belső oldalán, az ülőpárna alatt található. Csatlakoztassa a vezetékét és biztosítsa azt a menetes gyűrűvel.

4. Párna- és háttámlahuzat kezelése


- A párna használata esetén a tarkón, illetve a vállon végzett nyomómasszázs intenzitása csökkenhet, ezért szövethuzat használatát javasoljuk.
- A háttámla huzata és a háttámla zipzárral (1), a párna és a háttámlahuzat tépőzárral (2) van egymáshoz rögzítve.

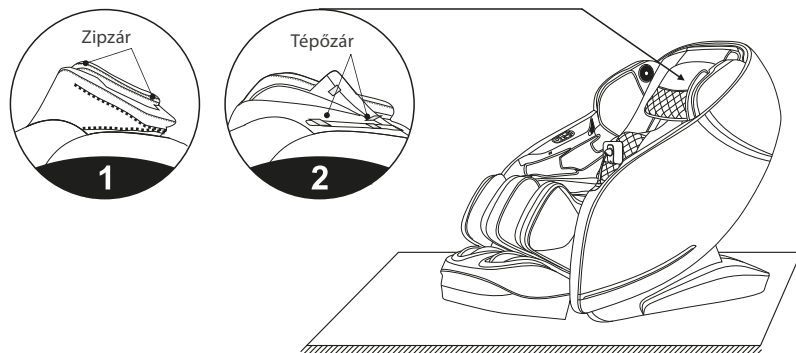

Felépítés és összeszerelés

5. Védőintézkedések a padló sérülései ellen




- A padlót érő sérülések elkerülése érdekében állítsa a masszázsfotelt szőnyegre vagy egyéb stabil felületre.

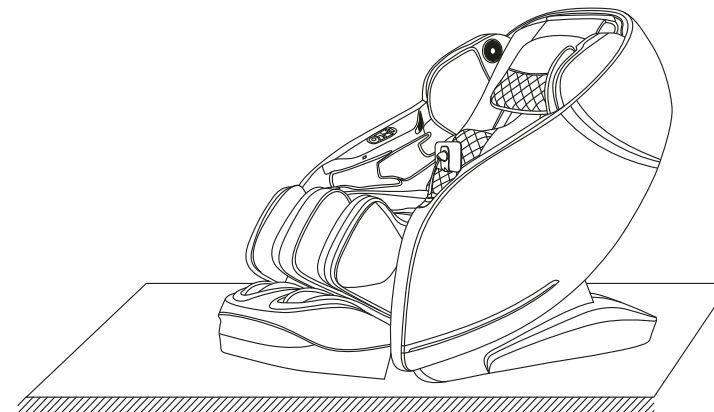

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a masszázsfotelt ne állítsa parkettára, egyenetlen felületre, és ne helyezze el szűk helyiségben.

6. Kikapcsolás, a masszázs befejezése


- Az elektromos csatlakozó doboz (1) masszázs közbeni megnyomásával minden masszázsfunkció azonnal leáll. A háttámla és a vádlimasszázs-egység visszaáll eredeti helyzetébe. A masszázs idő lejártával az összes masszázsfunkció azonnal leáll.
- A teljes masszázsfotel energiaellátásának kikapcsolása. (2) (3)

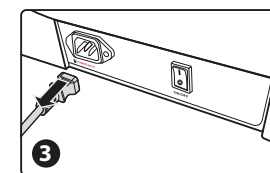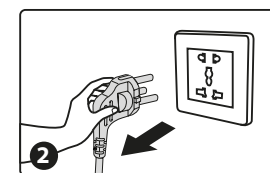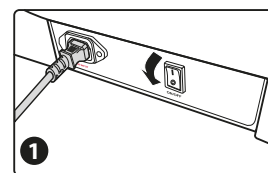

Felépítés és összeszerelés

7. Masszázsfofel átállítása

- Ügyeljen arra, hogy hálózati kábelek ne legyenek a földön. Hajtsa a háttámlát egy adott szögben hátrafelé (miközben a súlypont a görgőkre esik), tolja a fotelt a kezével előre vagy hátra, és végül állítsa lassan és finoman vissza a kiindulópozícióba.

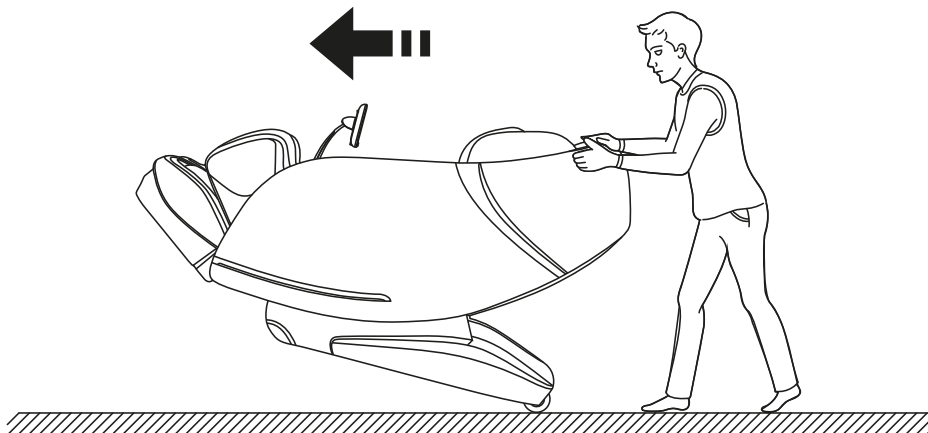

ÚTMUTATÓ: A fotel áthelyezése előtt először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a hálózati kábelt, valamint az összekötőkábelt.

ÚTMUTATÓ: Kérjük, a fotelt minimum két ember mozgassa. A második személy a fotelt előről felemelheti, hogy pontosan a görgőkre helyezhető legyen.

Tisztítás | ápolás | tárolás

A| A MŰBŐR TISZTÍTÁSA

A műbőrt puha, száraz ruhával törölgesse. Kérjük, ne tisztítsa olyan oldószerrel, amely hígítót, benzint vagy alkoholt tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer a műbőrben ne tegyen kárt. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tisztítószer használati útmutatóját.

Ha a műbőr erősen szennyezett, a következőképpen tisztítsa:

1. Nedvesítsen be egy puha ruhát forró vízzel vagy egy a kereskedelmi forgalomban kapható semleges mosószerrel és csavarja ki.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a ruhát alaposan kicsavarta.
3. Tisztítsa meg a műbőr felületet a ruhával.
4. Ügyeljen arra, hogy a ruhát a törölgetés közben többször kiöblítse.
5. Természetes módon hagyja a műbőrt megszáradni. Ne hajszáritóval szárítsa.

- A műbőr felülete nem megfelelő tisztítószer használata során kifakulhat vagy elszíneződhet. Tesztelje a tisztítószer egy kis helyen, mielőtt a teljes felületen használni kezdi.
- A műbőr alkohol-, hígító-, illetve benzin tartalmú tisztítószerrel való kezelése elszíneződéshez, vagy végül a szín teljes eltűnéséhez vezethet.

B| A MŰANYAG ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSA

1. Egy puha ruhát mártson semleges tisztítószerrel elkevert meleg vízbe, jól csavarja ki és törölgesse le a műanyag alkatrészeket.
2. Ne tisztítsa a műanyag alkatrészeket olyan oldószerrel, amely hígítót, benzint vagy alkoholt tartalmaz.
3. Tiszta vízbe mártott és kicsavart mikroszálas vagy puha ruhával törölgesse le őket.
4. A műanyag alkatrészeket levegőn hagyja megszáradni.

C| TÁROLÁS

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor javasolt a villamoskábel feltekerni és a készüléket száraz helyen tárolni.
- Soha ne tárolja a terméket magas hőmérsékleteken vagy nyílt láng közelében, es ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Tisztításhoz kérjük, csak kereskedelmi forgalomban kapható műbőr ápoló szereket használjon. Soha ne tisztítsa hígítóval, benzollal vagy alkohollal.
- Amennyiben a készülék nem sima felületen áll, akkor ne görgesse vagy tolja; emelje meg a mozgatóshoz.
- Kérjük használat után tartson szünetet, es ne használja a készüléket megszakítás nélkül többször egymás után.

Hibaelhárítás

HIBA	MAGYARÁZAT
• Üzemelés közben a motor hangja hallható.	• Ez egy normál üzemi hang.
• Nem működik rendesen a távirányító.	• Győződjön meg arról, hogy a hálózati dugó helyesen be van dugva a dugaszoló aljzatba, és az áram kapcsoló be van kapcsolva. Ellenőrizze a távirányító kábelét.
• A készülék leáll.	• Az előre beállított működési idő elerese vagy túl hosszú idejű használat után a fotel automatikusan kikapcsol. Ez biztosítja a fotel hosszabb élettartamát.
• Nem indulnak el az braintronics programok	• Győződjön meg róla, hogy a braintronics alkalmazás telepítve van és az Ön kontója aktiválva van. Ezen kívül ellenőrizze, hogy létrejött-e a Bluetooth kapcsolat az okostelefon és a masszázs fotel között.

Műszaki adatok

Mérete:	
egyesen:	80x148x120 cm
fekve:	80x180x105 cm
Súly:	141 kg
Max. terhelés:	120 kg
Feszültség:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény:	220 W
Menetidő:	20 perc
Braintronics:	21 perc
Tanúsítványok:	



EU megfelelőségi nyilatkozat

Megfelel az EMC 2014/30/EU és az LVD 2014/35/EU európai irányelveknek.

Jótállási feltételek

A kereskedő a fent leírt termékre a törvény által előírt jótállási időt biztosítja. A jótállás a vásárlás időpontjától érvényes. A dátumot a vásárláskor kapott blokkal kell igazolni. A kereskedő a Németországon belül regisztrált azon termékeket, amelyeken hibákat észlelnek, költségmentesen megjavíttatja, illetve pótolja. Ez nem vonatkozik a gyorsan kopó részekre, mint például a szövet huzatokra. A jótállás érvényesítéséhez a hibás eszközt be kell küldeni a vásárláskor kapott blokkal együtt meg a jótállási idő lejártá előtt.

A jótállási igény megszűnik, amennyiben megállapításra kerül, hogy a hibát pl. külső behatás vagy nem a gyártó, vagy az erre jogosult kereskedelmi partner által elvégzett javítás, illetve átalakítás okozta. A kereskedő által nyújtott jótállás a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik. A jótállás keretén belül a gyártó, illetve a kereskedő nem vállal további felelősséget es nem felelős olyan karokért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt es/vagy a termék hibás használata során keletkezett. Ha a gyártó a termék átvizsgálása során megállapítja, hogy a jótállási igény olyan hibára vonatkozik, amely nem tartozik a jótállásba, vagy a jótállási idő lejárt, akkor a termék átvizsgálásának es javításának költségei vevőt terhelik.

Jogi tudnivaló: A tartalmak egyike sem képez gyógyászati kijelentést. Betegségek es más testi zavarok diagnózisa es terápiája orvosi, természet gyógyászati vagy terapeuta általi kezelést tesznek szükségessé. Az adatok kizárólag informatív jellegűek es nem pótolhatják az orvosi kezelést. Minden felhasználó köteles gondos ellenőrzés es adott esetben egy specialistával történő konzultáció után megállapítani, hogy az alkalmazás előnyös-e a konkrét esetben. Minden alkalmazás vagy terápia a felhasználó felelősségére történik. Tartózkodunk bármilyen gyógyászati kijelentésektől vagy ígéretektől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Németország
info@casada.com
www.casada.com

A képek es a szövegek szerzői joga a CASADA International GmbH cég birtokában van, ezek további felhasználása tilos a cég kifejezett hozzájárulása nélkül.
Copyright © 2019 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.



[illegible][illegible]

