

TM
Casada
health & beauty



< relax in style

QUATTROMEDIV-S 

GRATULÁLUNK!

Ön e masszázskészülék megvásárlásával tanújelét adta egészségtudatosságának.

Annak érdekében, hogy a készülék előnyeit sokáig élvezhesse, kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és tartsa be azokat!

Sok örömet kívánunk Quattromed IV-S készüléke használata során.

TARTALOMJEGYZÉK

52	Biztonsági utasítások
52	Üzembe helyezés
53	Műszakiadatok
53	Felszereltség / funkciók
55	Távirányítás
56	Masszázstechnikák
56	Hibakeresés
57	Kezelési útmutató
57	Tárolás
57	EU-megfelelőségi nyilatkozat
57	Garancia rendelkezések

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Mielőtt a masszírozó készüléket üzembe helyezi, a kifogástalan funkció és az optimális működés biztosítása érdekében, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat. Kérjük, őrizze meg a kezelési útmutatót!

- Ez a masszírozó készülék megfelel a technika elfogadott alapelveinek és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- A készülék nem igényel karbantartást. Az esetlegesen szükséges javítást csak engedélyezett szakember végezheti. A szakszerűtlen használat és a nem engedélyezett javítás biztonsági okokból tilos és a garancia is érvényét veszti.
- A hálózati csatlakozót soha ne érintse meg nedves kézzel.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel, magas hőmérséklettel vagy közvetlen napsugárzással.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból annak érdekében, hogy elkerülje a rövidzárlat veszélyét.
- Ne használjon sérült csatlakozót, kábelt vagy laza foglalatot. Ha a csatlakozó vagy a kábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval, a szerviz-képviselővel vagy képzett szakemberrel. Működési hiba esetén, kérjük, azonnal szakítsa meg az összeköttetést az áramellátással. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Az izomzat és az idegek túlzott ingerlésének elkerülése érdekében, ne lépje túl a javasolt 30 perces masszázsidőt.
- Soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Minden masszázst - a kézz masszázst is - kerülni kell, ha Ön terhes és/vagy a következő panaszok valamelyike vagy akár több is fennáll a masszírozott területen: friss sérülés, trombózisos megbetegedések, bármilyen jellegű gyulladások vagy duzzanatok, valamint rák. Testi fogyatékossg és betegség kezelése esetén javasoljuk, hogy kérje ki orvosa tanácsát.
- A készüléket nem szabad vezetés közben használni.
- Ha Ön elektromos segédeszközzel, például szívritmus-szabályzóval rendelkezik, akkor a masszázs előtt feltétlenül kérjen orvosi tanácsot.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a masszírozó készülékhez, majd csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a konnektorba. Kapcsolja be a masszírozó készüléket a távirányítóval.

MŰSZAKI ADATOK

Méreték: 75 x 46 x 8 cm

Súly: 9 kg

Feszültség: Bemenet: AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: DC 12 V, 3500 mA

Névleges teljesítmény: 42 Watt

Automatikus futamidő: 15 perc

Tanúsítvány:



FELSZERELTSÉG / FUNKCIÓK



Kérjük, helyezze Quattromed IV-S készülékét a masszírozáshoz egy stabil székre vagy fotelra. A testsúly terhelése fokozza a masszírozás hatását. Kérjük, ügyeljen arra, hogy egész testével közepén üljön, hogy a masszírozó fejek gerincével párhuzamosan legyenek.

A Quattromed IV-S egy S-vonalú mechanikával rendelkezik, amely a gerinc természetes formájának mintájára készült. Ez mindenek előtt az ágyéksígyóak területén előnyös, a testhez különösen közeli masszírozó fejeknek köszönhetően. A jáde kövek természetes ereje felerősíti a bekapcsolható hőfunkció pozitív hatását a testre.

Részletekre ügyelő formatervezésével a Quattromed IV-S mindenütt igazodik a testhez. Búcsúzzon el a megkeményedett izomzattól és hagyja, hogy a Quattromed IV-S kényeztesse Önt.



FELSZERELTSÉG / FUNKCIÓK

15 perc után a masszázs üzemmód automatikusan kikapcsolódik. A motor élettartamának növelése érdekében, legalább 30 perc eltelte után kapcsolja be ismét a masszírozó fejeket.. Ily módon a motoroknak elegendő idejük van, hogy lehűljenek. Testének is adjon egy kis szünetet. Azt javasoljuk, hogy naponta csak kétszer, legfeljebb háromszor végezzen masszírozást, nehogy túlságosan megterhelje izomzatát.



Az Ön biztonsága érdekében minden készüléket felszereltünk egy túlmelegedés elleni védelemmel. A túlzott terhelés és az erősen történő nyomás révén hő termelődik a motorban. Mielőtt ez veszélyforrás lehetne, a készülék automatikusan kikapcsol, és csak megfelelő várakozási idő - kb. 30-40 perc - után lehet visszakapcsolni.



[1] Be/Ki

Ezzel tudja a készüléket be- illetve kikapcsolni. Kikapcsoláskor megáll a masszáz és a mechanizmus automatikusan visszatér az alsó pihenő helyzetbe.

[2] Heating

A fűtő funkció be- illetve kikapcsolása.

[3] Idő (5 - 15 perc)

Az előre beállított masszázási idő 15 perc. Ezzel a gombbal egy tetszőleges masszázási időtartamot tud beállítani. (5 perces időközök/ 5-10-15).

MASSZÁZÁSI TERÜLET KIVÁLASZTÁSA

[4] A masszázás be-/kikapcsolása a hát egész területén.

[5] A masszázás be-/kikapcsolása a váll és a tarkó területén.

[6] A masszázás be-/kikapcsolása a hát-, ágyékrészen.

[7] V. On/Off

A vibrációs masszáz be - kikapcsolása az ülőrészen.

[8] Kneading

Ezzel a gombbal tudja a Kneading funkciót be- illetve kikapcsolni.

[9] V. Mode

Ezzel a gombbal tudja a vibráció intenzitását meghatározni. (enyhe - közepes - erős)

[10] Rolling


Ezzel a gombbal tudja a Rolling funkciót be- illetve kikapcsolni.

[11] Spot

A gomb egyszeri megnyomásával tudja a pontszerű masszázst aktiválni.

[12] ▲ / ▼

Ezekkel a gombokkal tudja a masszázó görgőket a pontszerű masszáz során a hát megfelelő részén elhelyezni. A gombok megnyomva tartása útján mozognak a görgők felfelé vagy lefelé. Ha a görgők elérték a kívánt helyzetet, akkor engedje el a gombot.

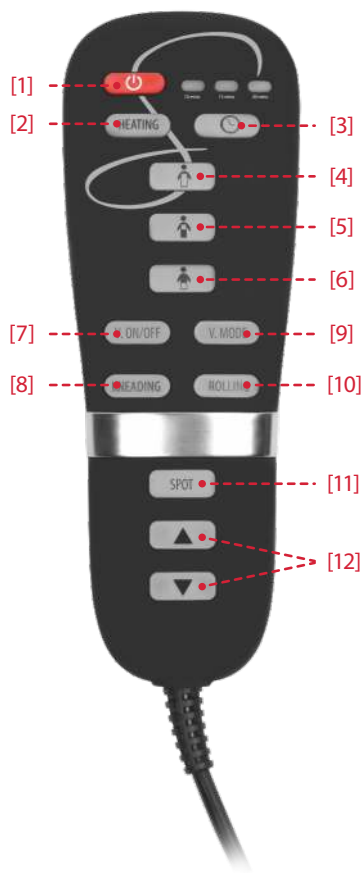

MASSÁZSTECHNIKÁK

SHIATSU/KNEADING

A shiatsu (ujjal nyomás) a fizioterápia Japánban kifejlesztett formája. A masszázs technika finom, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és rotációból áll. A shiatsu célja, hogy serkentse a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.



VIBRÁCIÓS MASSÁZS

A vibráció a testrészeket egyenletes rezgésbe hozza, amelyek egészen mélyre hatnak. Serkenti a vérkeringést, felmelegíti és pihenteti az izmokat.



ROLLING

A Rolling egy kellemes változatosság az izmok feszítése és lazítása között és ezért különösen nyugtató és pihentető hatású. Ezt a technikát gyakran használják a masszázs végén az izomzat lazítására és kikapcsolódásra.



HEATING

Mélyreható és a hőszugárzó hatás, amely révén tökéletes a lazulás. A mély hatás különösen jótékony hatású izommerevség esetén.



HIBAKERESÉS

Hibajelenség

A készülék az áramhálózatra van csatlakoztatva, de sem a készülék, sem a kezelőmező nem működik.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze az összeköttetést az adapter felé.
- Túl hosszú használat esetén a készülék túlmelegedhet, ezért kapcsolja ki és hagyja 30-50 percig hűlni.

TÁROLÁS / TISZTÍTÁS

Rendszeres ápolással növelhető a Quadromed III készülék élettartama, és ugyanakkor biztosítja a biztonságos működést.

- 1 Ajánlott tárolás: száraz, pormentes helyen.
- 2 Ne hagyjon folyadékokat és nyílt lángot a Quadromed III készülék közelében.
- 3 A készüléket csak száraz, puha törlőkendővel tisztítsa.
- 4 Ha már nem használja a Quadromed III készüléket, válassza le az áramhálózatról.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megfelel a 2006/95/EK európai irányelveknek.

GARANCIA RENDELKEZÉSEK

A kereskedő a túlóldalon leírt termékre a törvényben előírt jótállási (garancia) időt biztosítja. A garancia a vásárlás dátumától érvényes. A vásárlás dátuma a vásárlási bizonylattal igazolható. A kereskedő a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, melyeknél hibát állapítottak meg, ingyen javítja vagy cseréli. Ez nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, például az anyagfedésekre. A garanciaigény feltétele a hibás készülék és a vásárlási bizonylat beküldése a garanciaidő lejárta előtt.

A garanciaigény érvényét veszti, ha a hibáról kiderül, hogy pl. külső behatás vagy nem a gyártó vagy hivatalos szerződéses kereskedő által végzett javítás vagy módosítás okozta.

Az eladó által biztosított garancia a termék javítására, illetve cseréjére vonatkozik. E garancia keretében a gyártó, illetve az eladó nem vállal további felelősséget és nem felel olyan károkért, melyeket a használati utasítás figyelmen kívül hagyása és/vagy a termék visszaélészerű alkalmazása okozott.

Ha a gyártónál a termék vizsgálatakor kiderül, hogy a garanciális követelés egy, a garanciában nem szereplő hibára vonatkozik vagy a garanciaidő lejárt, az ellenőrzés és javítás költségeit az ügyfélnek kell viselnie.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
info@casada.com
www.casada.com

A képek és szövegek a Casada International GmbH szerzői jogvédelme alatt állnak, és azokat kifejezett jóváhagyás nélkül nem szabad felhasználni.

Copyright (c) 2014 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.

