

relax in style


CASADA
health & beauty



Miniwell

Kezelési utasítás | *Manual*



< relax in style

Alapítása, a 2000. év óta a Casada név az értékes termékeket jelenti a wellness és fitness területén.

Ma a Casada-készülékek világszerte 37 országban kaphatók. Folyamatos továbbfejlesztéssel, összetéveszthetetlen formatervezéssel és az életminőségre javítására vonatkozó erős irányultsággal a Casada-termékek ugyanannyira kitűnnek, mint a megbízható és kiváló minőségükkel.

Gratulálunk!

E masszázs eszköz megvásárlásával Ön bizonyította egészség tudatosságát.

Hogy e készülék előnyeit hosszú ideig élvezhesse, kérjük, a biztonsági tájékoztatást figyelmesen olvassa el és vegye azt figyelembe.

Sok örömet kívánunk személyes Miniwell készülékével.

5	A masszázs
6	Biztonsági tájékoztatások
7	Szállítási terjedelem
7	Üzembe helyezés
7	Műszaki adatok
8	Felszereltség / funkciók
9	Kezelőmező
10	Hibakeresés
10	Tárolás/ápolás
10	EU egyezőségi nyilatkozat
11	Szavatossági rendelkezések
26	Jegyzetek



Mindenki ismeri a feszült izmok masszázzsal történő jótékony lazítását. Az izmokon, véredényeken és idegpályákon belüli folyamatok részletesen magyarázhatóak.

A testben két keringési rendszer van. A vérkeringés, mely a szívből indul, látja el az agyat, a szerveket és az izomzatot tápanyagokkal és a létfontosságú oxigénnel, míg a nyirokrendszer gondoskodik arról, hogy az anyagcseretermékek, salak és méreg kiürüljenek a testből.

Ha az immunrendszert fertőzések és vírusok terhelik, az orvos először a nyirokcsomókat tapogatja meg, mivel ezek termelik a védekező sejteket, és erre a terhelésre duzzanattal reagálnak.

Minden masszázs serkenti e rendszert és így támogatja a káros anyagok elszállítását, és az ellátást oxigénnel és tápanyaggal.



Mielőtt a masszázseszközt üzembe helyezné, kérjük, olvassa el nagyon gondosan a következő tájékoztatásokat, hogy a kifogástalan funkció és az optimális működésmód biztosított legyen. Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót!

- Ez a masszázseszköz megfelel a technika elismert szabályainak és az aktuális biztonsági rendelkezéseknek.
- A készülék karbantartást nem igényel. Az esetlegesen szükséges javítást csak engedélyezett szakember végezheti. A szakszerűtlen használat és a nem engedélyezett javítás biztonsági okokból tilos és garanciavesztéshez vezet.
- A hálózati csatlakozót soha ne érintse nedves kézzel.
- Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel, magas hőmérséklettel vagy közvetlen napsugárzással.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, hogy a rövidzárlat veszélyét elkerülje.
- Ne használjon sérült dugót, kábelt vagy laza foglalatot. Ha a dugó vagy a kábel sérült, azt a gyártónak, a szerviz-képviselőnek vagy képzett személyzetnek kell kicserélnie. Működési hiba esetén kérjük, azonnal szakítsa meg az összeköttetést az áramellátással. A rendeltetéssel ellentétes vagy helytelen használat kizárja a károkért viselt felelősséget.
- Az izomzat és az idegek túlzott ingerlésének elkerülésére a javasolt, 30 perces masszázsidőt ne lépjék túl.
- Soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Minden masszázzsal - a kézi masszázzsal is - fel kell hagyni, ha Ön várandós és/vagy a következő panaszok valamelyike vagy akár több is fennáll a masszírozott területen: friss sérülés, trombózisos megbetegedések, bármilyen jellegű gyulladások vagy duzzanatok, valamint rák. Fogyatékoság és fájdalom kezelése esetén javasolt az orvossal történő egyeztetés.
- A készüléket autózás közben nem szabad használni.
- Ha Ön elektromos segédeszközöktől, mint pl. szívritmus-szabályzó, függ, akkor mindenképp a **masszázs előtt** kérje az orvos tanácsát.

Miniwell

- Hálózati adapter
- 12 V-os autóadapter

Üzembe helyezés

Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a hálózati dugón megadott feszültséggel. Ha még nem történt meg, kösse össze a hálózati kábelt a masszázskészülékkel, majd csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorba.

Az autóadapterrel a Miniwell utazás közben is használható (de nem vezetés közben!). Az autóadapert egyszerűen csatlakoztassa a szivargyújtóba.

Műszaki adatok:

Méretek: 33 x 19 x 11

cm Súly: 1,3 kg

Feszültség:


Bemenet: AC 200-240 V ~ 50 Hz

Kimenet: DC 12 V, 1600

mA Névleges teljesítmény: 19,2

Watt Tanúsítványok:



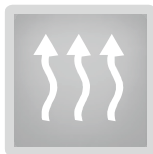

HEATING



KNEADING

Ez a praktikus és rugalmas masszázspárna lágyan lazítja az izomzatot és a legrövidebb idő alatt javítja közérzetét anélkül, hogy a pamlagról vagy fotelből fel kellene állnia. Teremtse meg a jólét oázisát saját falai között, hagyja, hogy kimasszírozza lelkéből az egész napi stresszt és hozza egyensúlyba testét és lelkét.

A Miniwell négy, ergonomikusan elrendezett masszázsfefe jótékony, körkörös mozgással masszírozza testének kívánt területét. A hőfunkció rákapcsolása lágyan felmelegíti izmait és már az első percekben belül egyedülállóan jó érzés önti el testét.

A Miniwell-lel végzett rendszeres masszázs stimulálja az idegpályákat és aktiválja az anyagcserét, a vérrellátást és oldja a makacs feszességeket. A belső szervek blokádjai és zavarai pozitívan befolyásolhatók.

Aki egyszer már érezte a shiatsu-masszázs élvezetét, mindig emlékezni fog jótékony hatására. Itt teljesen lényegtelen, hogy a panaszok megelőzésére vették igénybe, vagy csak lazítás és az életenergia aktiválásának céljából.

A shiatsu/gyúrás masszázsra az a központi szempont érvényes, hogy az embert egységnek kell tekinteni. Ebben a masszázsmodszemben egyesülnek a távol-keleti orvoslás hagyományos ismeretei a modern kezelési módszerekkel. A shiatsu-masszázs a testnek felüdülést, vitalitást és regenerálást nyújt. Emellett stressz esetén megnyugtatóan hat és javítja az általános jó közérzetet.



[1]

[1] On/off
Ezt a gombot nyomja meg a Miniwell indításához. A gyúrás/shiatsu funkció elkezdődik, a hőfunkciót aktiválja.

A Miniwell kikapcsolásához ezt a gombot nyomja meg.

Hiba	Megszüntetés:
A készülék az áramhálózatra van csatlakoztatva, sem a készülék, sem a kezelőmező nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze az összeköttetést az adapter felé.• Túl hosszú használatnál a készülék túlmelegedhet; ezért kapcsolja ki és hagyja 30-50 percig hűlni.

Tárolás / ápolás

A rendszeres ápolással növelhető a MiniWell készülék élettartama, valamint ez gondoskodik a minden időben biztonságos üzemelésről.

1. Javasolt tárolás: száraz, pormentes helyen.
2. Tartsa távol a Miniwell készüléktől a folyadékokat és a nyílt lángot.
3. A készüléket száraz, puha ruhával tisztítsa.
4. Ha már nem használja, válassza le a Miniwell készüléket az áramhálózatról.

EU egyezőségi nyilatkozat

Megfelel a 2006/95/EK európai irányelveknek.

A kereskedő a túloldalon leírt termékre a törvényesen előírt jótállási időt biztosítja; a jótállás a vásárlás dátumától érvényes. A vásárlási dátum a vásárlási bizonylattal igazolható. A kereskedő a Magyarországon nyilvántartott termékeket, melyeknél hibát állapítottak meg, ingyen javítja vagy cseréli. Ez nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, mint pl. az anyagfedések. Előfeltétele a hibás készülék beküldése a vásárlási bizonylattal a garanciális idő lejárta előtt.

A garanciális igény megszűnik, ha a hibát a megállapítások szerint pl. külső behatás vagy a nem a gyártó vagy hivatalos szerződéses kereskedő által végzett javítás vagy módosítás okozta.

Az eladó által biztosított garancia a termék javítására ill. cseréjére szorítkozik. E garancia keretében a gyártó ill. az eladó nem vállal további felelősséget és nem felel azokért a károkért, melyeket a használati utasítás figyelmen kívül hagyása és/vagy a termék visszaélésszerű alkalmazása okozott.

Ha a gyártónál a termék ellenőrzésekor kiderül, ha a szavatosság kérése egy, a szavatosságban nem szereplő hibára vonatkozik vagy a szavatossági határidő lejárt, az ellenőrzés és javítás költségeit az ügyfélnek kell viselnie.

casada international gmbh
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
info@casada.com
www.casada.com

A képek és szövegek a Casada International GmbH szerzői jogai alatt állnak, és azokat kifejezett jóváhagyás nélkül nem szabad tovább hasznosítani.

copyright (c) 2012 casada international gmbh.
Minden jog fenntartva.



