



DR.STONE

JADE & TURMALIN HŐTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK





< relaxmyway

A 2000-ben történt alapítása óta a CASADA név egyet jelent kiváló minőségű masszáz és fitnesz termékekkel.

Napjainkban világszerte 37 országban kaphatók a CASADA-termékek. A CASADA-termékeket nem csak a folyamatos fejlesztés, az egyedi formatervezés és az életminőség javítására összpontosító nagyfokú irányultság jellemzi, kitűnnek megbízható és kiváló minőségükkel is.

Gratulálunk

A masszírozó készülék megvásárlásával Ön egészségtudatosságát igazolja.

Annak érdekében, hogy hosszú ideig tudja használni a készülék nyújtotta előnyöket, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat.

Kívánjuk, hogy lelje örömét az Ön személyes Dr. Stone készülékében.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	4
A csomag tartalma.....	5
Üzembe helyezés	6
Jellemzők	6
Távírányítás	7
Tárolás / tisztítás	8
Műszaki adatok	8
Hibakeresés	8
EU megfelelőségi nyilatkozat.....	9
Garanciális rendelkezések.....	9


Biztonsági utasítások



A masszírozó készülék használatba vétele előtt, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat a kifogástalan működés és az optimális hatás érdekében. Kérjük őrizze meg ezt a használati útmutatót!

- Ez a masszírozó készülék megfelel a technika elismert alapelveinek és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- Ez a készülék nem igényel karbantartást. Az esetleg szükséges javításokat kizárólag erre felhatalmazott szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat, valamint a jogosulatlan javítás biztonsági okokból tilos, és a garancia, ill. a jótállás elvesztését eredményezi.
- Soha ne nyúljon vizes kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz.
- Kérjük, ne hagyja, hogy a készüléket víz, magas hőmérséklet és közvetlen napsugár érje.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, hogy megelőzze a rövidzárlat veszélyét.
- Ne használjon sérült hálózati csatlakozódugót, hálózati kábelt vagy laza foglalatokat. Ha a csatlakozódugó vagy a hálózati kábel sérült, akkor azt a gyártóval, a szervizképvisellel vagy szakképzett személlyel kell kicseréltetni.
- Működési zavar esetén azonnal szüntesse meg az áramellátást.
- A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használat kizárja a kártérítési kötelezettséget.
- Az izmok és az idegek túlzott stimulációjának elkerülése érdekében, ne lépje túl a 30 perces ajánlott masszírozási időt.
- Minden masszázst – a kézz masszázst is – mellőzni kell, ha Ön terhes és/vagy Önnél az alábbi panaszok közül egy vagy több figyelhető meg a masszírozás területén: friss sérülés, trombózisos betegség, min denféle gyulladás és duzzanat, valamint rákos megbetegedés. Ha betegségek és bántalmak miatt orvosi kezelés alatt áll, azt javasoljuk, hogy a masszírozás előtt egyeztessen kezelőorvosával.
- Ne használja a készüléket vezetés közben.
- Amennyiben Ön elektromos segédeszközöket, például szívritmus szabályzót használ, mindenképpen kérdezze meg orvosát a masszírozás előtt.
- A mellékelt csomagolóanyagot nem szabad játékszernek használni.

A csomag tartalma

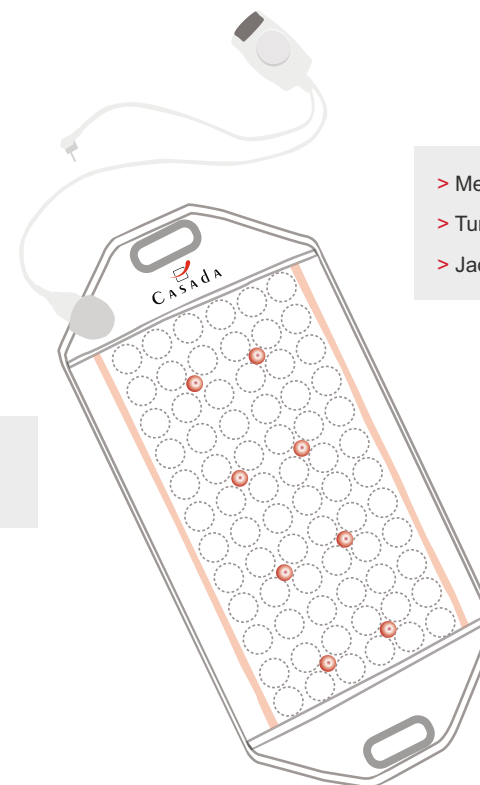

- > Melegítő készülék
- > Turmalin kövek
- > Jade kövek

- > Távirányító
- > Hálózati csatlakozó

Üzembe helyezés

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó és a távirányító sértetlen állapotban vannak.

- > Csatlakoztassa a tápkábelt egy 220V-os áramforráshoz.
- > Nyomja meg a bekapcsológombot, a kijelzőn megjelenik a kövek tényleges hőmérséklete.
- > Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba, és válassza ki a kívánt hőmérsékletet. Ez 3 másodpercig jelenik meg, amíg a hőmérsékletmérő vissza nem tér a tényleges szintre. A bemelegítési fázis alatt a kijelző mindig az aktuális hőmérsékletet mutatja.
- > A kívánt hőmérséklet 15-20 perc múlva érhető el.
- > Az alkalmazás után kapcsolja ki teljesen a készüléket, és húzza ki az áramforrásról.

Jellemzők

Dr. Stone a jade és turmalin kövek, illetve a fotonok természetes melegmegtartó tulajdonságára alapozva kifejlesztette a fényenergiát és akupresszúrát. Mindezek pozitívan befolyásolják az egész test termikus akupresszúrás pontjait, és rendszeres használatuk javítja a vérkeringést, erősítik az immunrendszert, hangulatnövelők, illetve az általános közérzetre is jó hatással vannak, valamint az egész szervezetet egyensúlyba hozzák.



Jade hőterápia

A jadedő a természetes melegmegtartó és -közvetítő anyagok közé tartozik. Célzottan a masszázsféjbe építve átadja ezt a mélyreható meleget, és feszültségoldó hatása van.



Turmalin hőterápia

A turmalin javítja a koncentrációt, segít az elalvásban és erősíti az immunrendszert.



Foton fényforrás


A fotonok kis energiájú fényrészecskék. Ez a fény, egyszerűen mondva, az emberi szövetekben meglévő természetes energiát, illetve az öngyógyítást tudja reaktiválni és erősíteni.

Távirányító

Felmelegítés 45° fokig – tisztítja a vérereket és helyreállítja a hormonális egyensúlyt.

Felmelegítés 45° és 55° között – javítja a vérkeringést és lazítja az izmokat.

Felmelegítés 55° és 70° között – a speciális mélyreható meleg regenerálja a véredényeket, bőrt és ízületeket, illetve erősíti az immunrendszert.

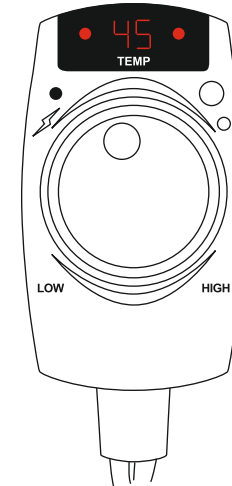

- > Hőmérséklet kijelző
- > Display
- > Az önműködő billentyűzár blokkolja az elektromágneses sugárzást.

- > Teljesítmény mutató
- > On/Off
- > Hőmérséklet szabályozó

Fenntartjuk a jogot a készülék külsejének megváltoztatására illetve a termékleírás kiegészítésére. A változtatások előzetes értesítés nélkül végrehajthatók. Ez érvényes a színekre és tartozékokra is.

Tárolás / tisztítás

- > Húzza ki a készüléket a tápegységből és hagyja kihűlni.
- > A terméket mindig puha, száraz és pormentes ruhával tisztítsa.
- > Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- > Ne használjon csiszolóanyagot, ecsetet, benzint, petróleumot, polírozót vagy estékeltávolítót a készülék tisztításához.

Technikai adatok

Termék:	Dr. Stone
Méret:	47 x 100 x 2,5 cm
Súly:	2,65 kg
Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény:	100 watt
Választható hőmérséklet:	30 - 70 ° C
A kövek száma:	80 db (36 természetes jade kő - 36 turmalin kő - 8 foton fényforrás)

Tanúsítványok:



Hibakeresés

Hiba	Megoldás
A készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, de sem az eszköz, sem a vezérlőpult nem működik.	<ul style="list-style-type: none">> Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.> Ha túl sokáig használják, akkor a készülék túlmelegedhet. Tehát kapcsolja ki a készüléket és hagyja 30 - 50 percig hűlni.

EU megfelelési nyilatkozat

Megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU és a kisfeszültségi villamossági termékekről szóló 2014/35/EU irányelvnek.

Garanciális rendelkezések

A kereskedő a hatoldalon leírt termekre a törvényben meghatározott jótállási időt biztosítja. A garancia a vásárlás napjától érvényes. A vásárlás időpontja a vásárlást igazoló bizonylattal igazolható.

A kereskedő a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, amelyeknél hibát állapítottak meg, díjmentesen megjavítja vagy kicseréli. Ennek feltételé a hibás termék beküldése a vásárlást igazoló bizonylattal együtt a jótállási vagy garanciális idő lejarta előtt.

A garancia érvényét veszti, amennyiben egy hiba megállapítása után a garancia igény például külső hatások vagy olyan javítás vagy módosítás eredményeként merül fel, amit nem a gyártó vagy a hivatalos forgalmazója hajtott végre.

Jogi nyilatkozat: Valamennyi tartalom nem gyógyító hatásra vonatkozó kijelentés. Betegségek és más fizikai rendellenességek diagnosztizálása és gyógyítása orvosok, természet gyógyászok vagy terapeuták által végzett kezelést igényel. Az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem használhatók orvosi kezelés helyettesítésére. Minden felhasználót arra kérnek, hogy alapos vizsgalattal, és ha szükséges, szakemberrel való konzultációt követően állapítsak meg, hogy az alkalmazások az adott esetben előnyösek-e.

Bármely alkalmazás vagy terápia a felhasználó saját felelősségére történik. Elhatároljuk magunkat bármely gyógyító hatásra vonatkozó kijelentéstől vagy ígérettől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Németország
info@casada.com
www.casada.com

Copyright A képek és a szöveg a CASADA International GmbH szerzői jogi oltalma alatt áll és nem használható a cég kifejezett jóváhagyása nélkül.

Copyright © 2017 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.

